



ResMed

AirFit™ F30i



Mas libertad con igual rendimiento

Ahora no tienes que elegir entre lo que quieren tus pacientes y lo que necesitan. Presentamos AirFit™ F30i de ResMed, la mascarilla facial de contacto mínimo con una conexión de tubo en la parte superior de la cabeza diseñada para brindar un sellado confiable con la libertad de dormir en cualquier posición. AirFit F30i es tan eficaz que, en un estudio de comparación directa, fue la mascarilla preferida por 3 de cada 4 usuarios de CPAP en relación con la mascarilla de la competencia por su rendimiento general.¹



ResMed.com/AirFitF30i

Características destacadas de AirFit F30i

El codo de liberación

rápida permite una fácil desconexión. Permanece unido al tubo para garantizar que las partes de la mascarilla no se pierdan ni se atasquen.

La armazón del conducto

flexible permite que el aire presurizado fluya a través del codo hacia la armazón y la almohadilla.

El diseño de la almohadilla

facial UltraCompact es curvo para estabilidad y un mejor rendimiento del sellado.

El diseño del tubo en la parte superior de la cabeza

brinda a los pacientes la libertad de dormir en cualquier posición.

Los **clips magnéticos** facilitan la conexión segura de la parte inferior del arnés a la armazón.



Sistemas completos de mascarilla

(incluye la armazón de la mascarilla, la almohadilla facial y el arnés)

Nombre del producto	Código del producto
Sistema AirFit F30i – S/SML	63330
Sistema AirFit F30i – S/STD	63331
Sistema AirFit F30i – M/STD	63332
Sistema AirFit F30i – W/STD	63333
Sistema AirFit F30i – M/LGE	63334

Almohadilla facial

Nombre del producto	Código del producto
Almohadilla de AirFit F30i – SML	63350
Almohadilla de AirFit F30i – MED	63351
Almohadilla de AirFit F30i – SML-WIDE	63352
Almohadilla de AirFit F30i – WIDE	63353

Armazón del conducto de la mascarilla (no incluye la almohadilla facial)

Nombre del producto	Código del producto
Conducto de AirFit F30i – SML	63368
Conducto de AirFit F30i – STD	63369
Conducto de AirFit F30i – LGE	63370

Arnés

Nombre del producto	Código del producto
Arnés de AirFit F30i – STD	63372


Una mejor experiencia con mascarilla facial

En un estudio reciente, los usuarios de mascarilla facial descubrieron que AirFit F30i era significativamente mejor* que la mascarilla facial de la competencia.¹ También descubrieron que les proporcionaba un sellado más confiable, era más fácil de usar* y era más cómodo de colocar y respirar que la mascarilla facial de la competencia.¹




Sistema completo de mascarillas

63330
63331
63332
63333
63334

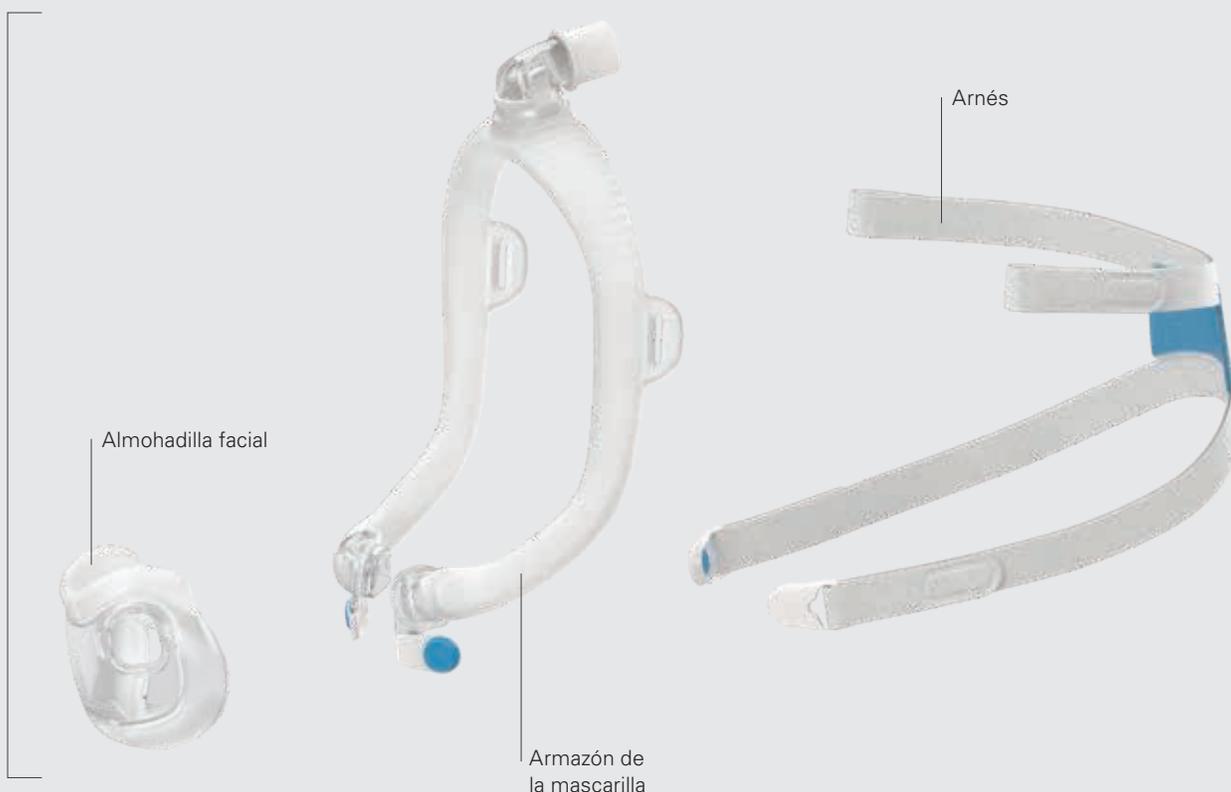

AirFit™ F30i
Full face mask

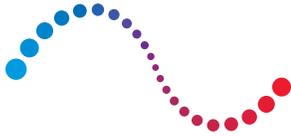

ResMed

AirFit™ F30i

Guía de ajuste para AirFit F30i



- Con una mano presionando la parte inferior de la almohadilla y la otra presionando la armazón del conducto, coloca la mascarilla frente a la cara.



- Coloca la almohadilla debajo de la nariz y contra la cara. Con el logotipo de ResMed y el arnés hacia arriba, tira el arnés sobre la cabeza.



- Coloca las correas inferiores del arnés debajo de las orejas y fija los clips magnéticos a los conectores de la armazón.



- Deshagas las pestañas de fijación de las correas superiores del arnés y tira de manera uniforme.



- Repita con las correas inferiores del arnés.



- Presiona los botones laterales en el codo y despegas de la armazón. Conecta el tubo de aire del dispositivo al codo, luego vuelve a conectarlo a la armazón.



Para personas con el pelo largo, recomendamos que el cabello se haga pasar a través de la parte trasera del arnés. Si el cabello está atado tipo cola de caballo, esta debe hacerse lo suficientemente alta como para ajustarse cómodamente a través de la parte trasera del arnés.

Consulta la guía del usuario para obtener más instrucciones e información completa sobre el etiquetado, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

*Los cálculos se basan en usuarios de CPAP en el estudio que tenían una preferencia de máscara. Los usuarios de CPAP calificaron los criterios objetivos para AirFit F30i y Competencia en una escala Likert de 0-10. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) en las puntuaciones medianas entre las dos máscaras. Fácil de usar se define como: fácil de colocar, ajustar y quitar.

1 Estudio clínico externo guiado por ResMed de 48 usuarios actuales de CPAP con máscara fácil evaluables del 24 de octubre al 20 de noviembre de 2018 en Sydney, AU y San Diego, CA, que probarán la máscara facial AirFit F30i y Competencia. Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1858836 5000 o 1800424 0737 (llamada gratuita). Visita ResMed.com para conocer otras ubicaciones de ResMed en todo el mundo. AirFit es una marca comercial y/o marca comercial registrada de la familia de empresas ResMed. Competencia registrado en los EUA y otros países. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso. Para obtener información sobre patentes y otra propiedad intelectual, visita ResMed.com/ip © 2020 ResMed. 10111781. 2020-11.